

PRESSOMED 2900 – UREDJAJ ZA TERAPIJU PRITISKOM SA 9 IZLAZA

Terapija pritiskom pomaže kod brojnih stanja koja uključuju :

- limfedemi (kongenitalni i post-operativni)
- flebo-limfedemi sa hroničnom venskom insuficijencijom
- tretman stasis ulcers
- edemi od mišićne aktivnosti
- hipo-lipodistrofija (celulit)
- prevencija pre i post-operativne duboko-venske tromboze
- mastektomski limfedemi (od kancera)
- poremećaji vensko-limfne cirkulacije
- sportska medicina

Specijalna kompresivna drenaža se javlja simultano duž celog obima bandažiranog uda putem sektora za "nogavice" gde se svaki od njih preklapa sa sledećim sektorom, simultano narastajući.

Sve ovo je brižljivo proučeno za laganu, nežnu i kontinualanu drenažu uda od donjih ka gornjim kao kada bi dve ruke gnječile ud i sumultano klizile na gore.

Pressomed 2900 obezbedjuje peristaltičku masažu korišćenjem "ključnih tačaka" - key point sa nezavisnim sektorima koji se preklapaju kao struktura "riblje kosti".

Svaki sektor se može podesiti sa različitim radnim pritiscima dok se tok izabranog tretmana može pratiti na 6" grafičkom LCD-u. Tokom rada, aparat pažljivo proverava integritet "ključnih tačaka" (gornjih ili donjih udova) i upozorava korisnika ukoliko se primeti bilo kakav kvar.

Ovaj revolucionarni sistem obezbedjuje optimalan rad uređaja a automatski tretman ne mora da se prekida. 50 protokola (terapijskih predloga je memorisano u samom aparatu), a još 50 protokola može umemorirati sam korisnik.


Terapija pritiskom znači da možete normalizovati venske i limfne cikluse, re-absorbovati "telangiaecasia"-ju i znatno redukovati dimenzije edema u udovima. Prema autoritativnim izvorima, kompresija uzrokovana peristaltičkim pritiskom modifikuje koheziju i permeabilnost konektivnog tkiva u smislu drenaže limfnog sistema i stvara nove interne drenažne kanale tzv. "collaterals". Akcija persitaltičke drenaže kompenzuje i poboljšava nisku absorbciju i stepen pokretanja na gore kolektora izdvajajući finrilarno tkivo koje su formirale staze.



BC7 - Professional 7-sector arm-band



GC9-P Professional lower limb kit point

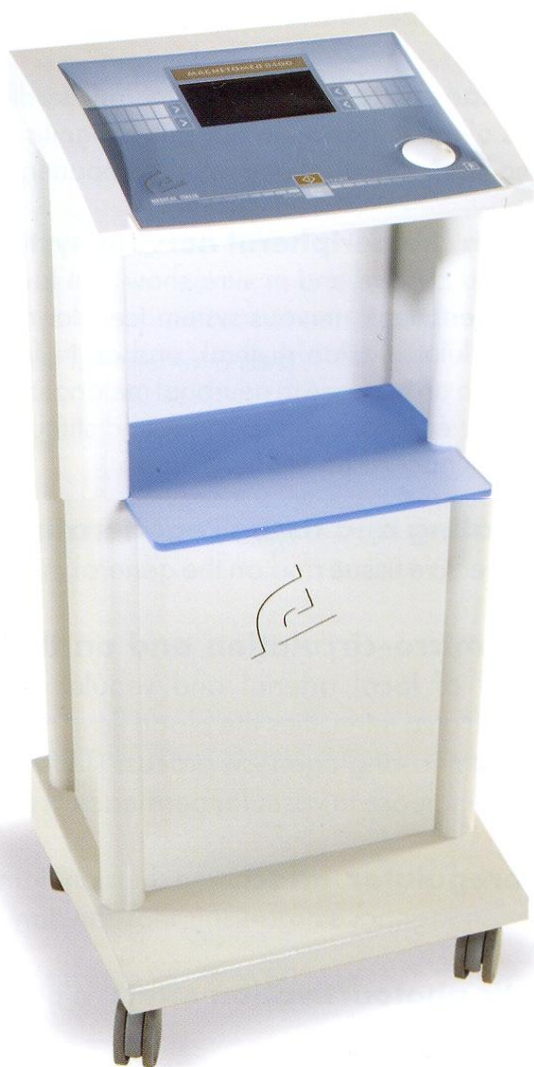

Aparat se isporučuje sa jednim od dva navedena ili oba aplikatora (po želji kornesika) :

GC-9 "key point" nogavice za tretman donjih ekstremiteta donjih udova

- 6-sektorne nožne trake + 1 ingvinlani sektor + dvosekturni abdominalni pojas
- Poliuretanske unutrašnje vazdušne komore
- Zatvaranje putem velcro-traka

BC7 7-sekturni kit za gornje ekstremitete naročito proučene i napravljene za tretman post-mastektomije

Tehničke karakteristike :

- 6" TFT LCD displej
- 64kbits smart kartica
- Integrisan serijski kontroler
- 2 x 16bitna procesora
- Nezavisna regulacija pritiska za svaki sektor
- 50 protokola uskladištenih u memoriju
- 50 protokola za memorisanje od strane korisnika
- Upozorenje ukoliko je "ključna tačka" oštećena
- Kontrolni test "ključnih tačaka"
- Automatska deflacija "ključnih tačaka" na kraju tretmana
- Broj izlaza : 9
- Vreme terapije : podesivo od 1-60 minuta